

Fractional Plasma Planik Skin Rejuvenation



PLANIK

یلانیك

جدول مشخصات

ولتاژ ورودی 220 VAC - 50 Hz
توان ورودی 110 VA
جریان ورودی 500 mA
سایز صفحه نمایش Touch Screen 7 inches
نوع هندپیس Mono 1 pcs - Fractional 1 pcs
فرکانس کاری 70 - 200 KHz
عرض پالس 24 - 60 ms Per Dot
انواع کارتریج RF - 5×5 - 3×3 - 2×5 - 1×5
Class I - type B class according to iec60601-1



اصفهان، خیابان سهروردی، بعد از سه راه
رودکی ساختمان سپیدار، طبقه اول، واحد ۱۶

۰۳۱-۳۷۷۹۰۵۱۰-۱۲
arialaserpasargad.com



مزایا


- بهترین جایگزین درمانی بجای لیزر فرکشنال و RF فرکشنال
- ایمنی بالا، بدون عوارض (PIH)، اثر بخشی عالی و با ماندگاری طولانی
- قیمت مناسب دستگاه، بدون هزینه ی مصرفی در مقایسه با تکنولوژی های مشابه
- تاثیر حیرت انگیز در لایه برداری و بازسازی الاستیسیت و کلاژن سازی پوست در اپیدرم
- امکان استفاده از تنظیمات متنوع انرژی و فرکانس جهت درمان لایه های سطحی و عمقی پوست
- جوانسازی و حذف چین و چروک و انواع اسکار با لایه برداری در نواحی مختلف صورت و بدن
- لیفت پوست با تحریک عمیق سلول های پوستی و افزایش مقاومت و الاستیسیت پوست
- تاثیر فوری و شروع فرایند بازسازی پوست بصورت آنی که تا سه ماه ادامه خواهد داشت
- افزایش گردش خون و تغذیه موثرتر سلول های پوست در ناحیه درمان
- ارائه درمان با انواع بی حسی های موضعی بدون نیاز به بلاک عصبی
- طراحی زیبا و هوشمند با استفاده از منوی ساده و امکان استفاده از تنظیمات پیشنهادی دستگاه (اتوماتیک) بر اساس نوع درمان و تایپ پوستی بیمار



نحوه عملکرد هندیپیس فرکشنال

تکنولوژی فرکشنال پلانیک انرژی خروجی پلاسما را به ستون هایی منظم و متعدد تقسیم می کند که باعث نتایج بهتر و محافظت بیشتر پوست بیمار می شود.

سایز کارتریج های فرکشنال در اندازه های ۵×۵ و ۳×۳ و ۵×۱ و ۵×۲ می باشد که با توجه به سایز ناحیه درمان توسط پزشک انتخاب می گردد.

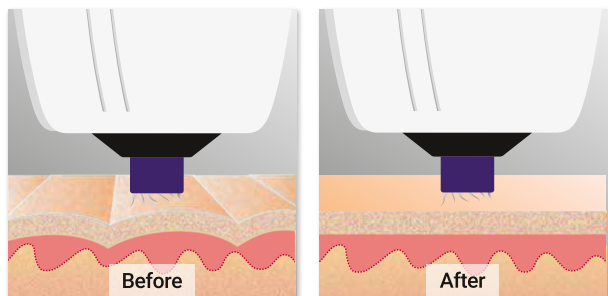

در هندیپیس فرکشنال توان و فرکانس کاملاً کنترل شده است و با توجه به رنگ پوست و نوع درمان انتخاب می گردد.

سرعت بالاتر و دقت بیشتر از مزایای این تکنولوژی است. نگهداری بافت سالم بین بافت های میکروپرن شده، بهبودی بیمار را سرعت می بخشد.

کارتریج RF این هندیپیس بدون ایجاد زخم روی اپیدرم، با ایجاد حرارت در درم، باعث تحریک سلول های فیبروبلاستی و در نتیجه کلاژن سازی بیشتر و بازسازی الاستین می شود.

برای نتایج بهتر از هر دو کارتریج RF و پلاسما بصورت ترکیبی میتوان استفاده کرد.



اندیکاسیون ها

- درمان افتادگی پوست صورت و بدن و افزایش قوام پوست
- با تحریک الاستین و کلاژن سازی
- بهبود و رفع چین و چروک های سطحی و عمیق پوست
- Rejuvenation (جوانسازی) و درخشان نمودن پوست
- درمان اسکار زخم های پوستی (بخیه، سوختگی....)
- درمان Stretch Mark (ترک های پوستی)
- درمان منافذ باز پوست (پوست پرتغالی)
- درمان Blepharoplasty (افتادگی پلک)
- درمان اسکار آکنه، جای آبله

نحوه عملکرد هندیپیس مونو

هندیپیس مونو دارای ۴ مدل نیدل متفاوت برای برداشت انواع ضایعات پوستی می باشد.

پلانیک هوای بین نیدل و پوست را یونیزه کرده و آرک پلاسمای تولید شده موجب تصعید لایه ی نازکی از سطح پوست می شود. در صورت ثابت نگه داشتن هندیپیس بر روی یک نقطه تنها به عمق تخریب افزوده می گردد بدون آنکه شعاع تخریب وسیع تر گردد.

هندیپیس مونو دستگاه پلانیک مناسب برای برداشتن انواع ضایعات پوستی سطحی و عمقی می باشد.

